


Hızlı rehber

DECT indePendant

Özel acil durum vericisi


indePendant Genel bakışta

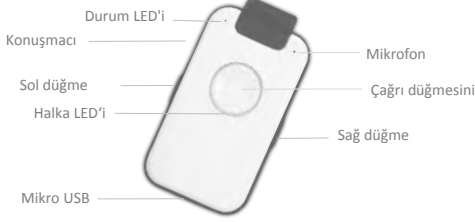

indePendant, merkezi arama dümesine sahip günlük asistaninizdir. Yardıma ihtiyacınız olursa, arama düğmesine basın; komşularınızla veya arkadaşlarınızla bağlantıda olacaksınız. Düşme veya duman alarmı, yardım çağrısını otomatik olarak tetikler. Tüm etkinlikler dil asistanı tarafından yönetilir. İsim listesi ile birlikte Rehber (10 giriş) okunuyor.

1

Adım 3: Telefon bağlantısını kontrol edin

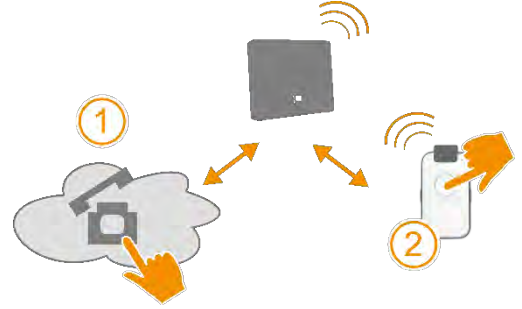

1. Cihazı cep telefonunuzla arayın.
2. Cihaz çaldığında aramayı cevaplayın.

Arayan numara ayrıca onuncu aile ve arkadaş numarası, ayrıca yardım çağrısı, düşme tespiti ve duman alarmı çağrısı için acil durum numarası olarak kaydedilir. PC APP ile bu numarayı değiştirin veya ekleyin.

4



Devreye

Adım 1: Yükleme



1. Yükleme diskini düz, kaymaz bir yüzeye yerleştirin.
2. Yükleme diskini güç kaynağına birlikte verilen USB kablosu ve AC adaptörü.
3. Cihazı yükleme diskine yaklaşık 30 dakika yerleştirin.

Not: Cihaz biraz ısınır; bu normal

2

Cihaz çalışmaya hazır

Tebrikler

Şimdi yapabilirsiniz:

- Telefon görüşmelerini kabul et
- Telefon numarasını arayın (bkz. Aile ve arkadaşlar)
- Yardım çağrısı

Aşağıdaki işlevler zaten etkin:

- Yardım için otomatik çağrı ile düşmeyi algılama
- Duman alarmı çağrısı (cihazı yükleme diskine yerleştirin)

PC APP ile yapılandırabilirsiniz:

- tüm yardım çağrıları (yardım, düşme, duman alarmı)
- daha fazla aile ve arkadaş - iletişim
- Zaman ve hatırlatıcılar

5

KONFIGURASYON



PC APP'yi başlat



1. Birlikte verilen USB çubuğunu bilgisayara bağlayın.
2. "INDEPENDANT" sürücüsünü seçin.
3. "PC_APP" programını başlatın ve gerekirse sürücü kurulumunu onaylayın.
4. Cihazı USB kablosuyla bilgisayara bağlayın.
5. "PC_APP" programını tekrar başlatın ve PC APP'nin çok basit tutulan talimatlarını izleyin.

6

İpuçları

Yük: Cihaz şarj plakasına doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. LED durumu, şarj işlemi sırasında pil durumunu gösterir. Batarya yeterince şarj edilmemişse cihaz kaydedilemez.

Kayıt: Lütfen DECT baz istasyonlarının yaklaşık 5 dakika sonra kayıt modunu otomatik olarak kapattığını unutmayın. Baz istasyonu PIN kodu "0000" değilse cihazı kaydetmek için PC APP kullanın.

Yardım sırasını arayın: "Çalma Süresi" seçin ve test edin; böylece arayan kişinin aramayı cevaplamak için yeterli zamanı olabilir. Aşağıdaki numaraların aramasını geciktirmemek için, arama süresi çok uzun olmamalıdır. Bir kişiyi hızlı ve güvenli bir şekilde bulmak için daha fazla temsilci seçin.

9

TEST FONKSİYONLARI



Yardım çağrısı



1. Çağrı düğmesine > 2sn. Yardım çağrısı sırası alındı.
2. Yardım çağrısını iptal etmek için arama düğmesine tekrar basın.

7


LED'ler

Renk	Ekran	Durum LED'i	Halka LED'i
kırmızı	kırpmak	DECT veya batarya: yeterli değil	Yardım çağrısı kuruldu
	sabit	yaklaşık 60 dak.	Yardım çağrısı var
sarı	kırpmak	DECT veya batarya: yeterli	- DECT kaydı - Güz değerlendirme
	sabit	yaklaşık 30 dak.	PC uygulamasına bağlı
yeşil	kırpmak	DECT veya batarya: iyi	Family & Friends Call kuruluyor
	sabit	Batarya tamamen dolu	Family & Friends Call ayarlandı

10



Ailenizi ve arkadaşlarınızı arayın

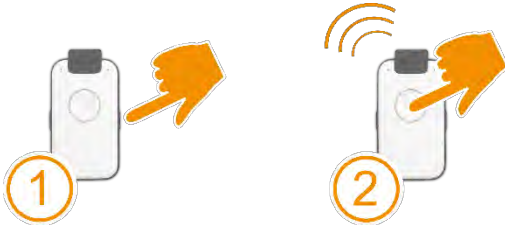

1. Numarayı aramak için bir sayfa tuşuna basın.
2. Numarayı seçtikten sonra (isim), arama düğmesine basın.
3. Aramayı iptal etmek için tekrar arama düğmesine basın.

8

Ürün ve iletişim bilgileri

Tayin
Typ

indePendant
DECT Pendant

Daha fazla bilgi için, lütfen satıcınıza başvurun veya web sitelerini ziyaret edin.

Muhtemel güncellenmiş bir kullanım kılavuzu bulacaksınız

- kapalı USB çubuğunda
- satıcının web sitesinde

11