

INBETRIEBNAHME

Gerät laden



Schritt 1

- Stellen Sie die Ladescheibe auf eine ebene, rutschfeste Fläche und verbinden Sie mit dem Stromnetz über das mitgelieferte USB-Kabel und Steckernetzteil
- Legen Sie **DA1432XL** für ca. 30 Min. auf die Ladescheibe und Achten Sie darauf, dass das Gerät korrekt platziert ist

Sprachassistent : »*Batterie wird geladen*«

Diese Meldung ist bei starker Entladung verzögert.


Hinweis: **DA1432XL** kann nur mit der Ladescheibe eingeschaltet werden

INBETRIEBNAHME


DA1432XL an DECT Basisstation anmelden

- Bringen Sie **DA1432XL** zu Ihrer Basisstation
- Anmeldemodus der Basisstation aktivieren

Beispiel Telekom Speedport

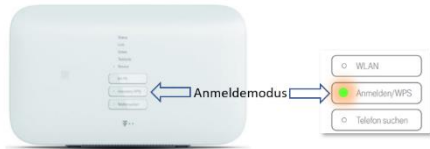

Beispiel 1&1 Fritzbox

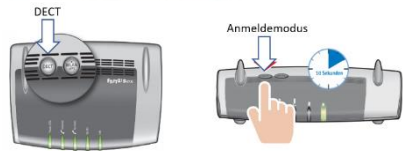

Hinweis: Der Anmeldemodus bleibt ca 5 Minuten aktiv

- Drücken Sie die **DA1432XL** -Ruftaste und achten Sie auf die Hinweise des Sprachassistenten
»*Anmeldung aktiviert*«

Hinweis: **DA1432XL** meldet sich mit PIN „0000“ an. Sollte der PIN Code Ihrer DECT Basisstation anders sein, müssen Sie die Anmeldung über die PC APP ausführen. Sie können PIN Codes bis zu 8 Ziffern eingeben.

INBETRIEBNAHME

Telefonverbindung prüfen

- Rufen Sie Ihre Telefonanlage von extern an z.B. mit Ihrem Mobilfunkgerät
- Wenn das Gerät klingelt,
- nehmen Sie den Anruf an.
DA1432XL ist jetzt betriebsfähig.




Schritt 3

Nach dem Auflegen werden Sie gefragt, ob Sie diese Telefonnummer ins Telefonbuch übernehmen wollen. Wenn ja, drücken Sie die Ruftaste. Sie wird dann als erste freie Telefonnummer abgelegt und als Notrufnummer für Hilferuf, Sturz und Rauchalarm verwendet, solange Sie keine anderen Kontakte über die PC APP eingetragen haben.

- ⇒ Ergänzen Sie weitere Nummern oder ändern Sie bestehende Nummern über das Konfigurationsprogramm: **PC APP** (**Schritt 4**)

Positionierungshilfe für Ladescheibe

Im Lieferumfang sind selbstklebende Gummischeiben enthalten. Sie dienen optional als Positionierungshilfe für **DA1432XL** auf der Ladescheibe. Wir haben einen Platzierungsvorschlag getestet, den wir empfehlen. Es steht Ihnen frei, andere Platzierungen zu wählen

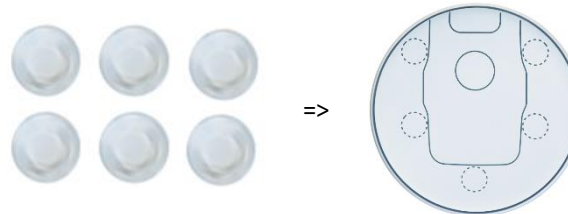

Legen Sie das Gerät immer auf die Ladescheibe, wenn es nicht gebraucht wird, wenn Sie weggehen oder in der Nacht. Schalten Sie das Gerät nicht aus !

Hinweis: Auf der Ladescheibe wird die automatische Rauchalarmerkennung aktiviert.


PC APP installieren

WICHTIG:

Laden Sie das Programm PC APP DA1432XL über nachfolgenden Link auf Ihren Windows PC:

www.pcapp.net

Sie müssen zuerst die PC APP **runterladen** und dann **installieren**. Hierzu starten Sie das heruntergeladene **SETUP** Programm.

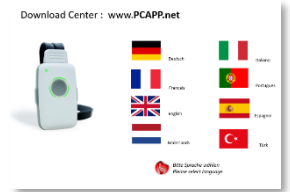

Nach erfolgreicher Installation sehen Sie das **DECT Telecare** ICON auf Ihrem Desktop.



Mit DoppelClick auf das ICON starten Sie die **PC APP**.



DA1432XL konfigurieren

PC APP öffnen DA1432XL konfigurieren

Schritt 5

WICHTIG: Schließen Sie **DA1432XL** mit dem USB-Kabel der Ladestation an den PC an. Dieses Kabel enthält die notwendige Datenverbindung.

Geben Sie nun in Ruhe alle Kontakte mit Namen und Telefonnummer ein. Achten Sie darauf, dass öfters verwendete Kontakte möglichst weit oben stehen. Geben Sie den Telefonregister verständliche Titel. Wie viele Register und Kontakte Sie eingeben, ist vollkommen frei.

Hinweis: Die drei Hilferufnummer werden vom **DA1432XL** Call Manager überwacht. Er sorgt, dass Anrufe von Automaten nicht angenommen werden. Lesen hierzu auch das Merkblatt **DA1432XL Hinweise**.

Telefonanruf ausführen über beide Seitentasten die schnelle Auswahl



- 1 Seitentaste drücken „Telefonbuch“ wählen
- 2 Seitentaste drücken Register auswählen
- 3 **Seitentaste wechseln** Namen auswählen
- 4 Ruftaste drücken *»Hubert wird angerufen«*

Methode 1 Schnellwahl für Geübte

Telefonanruf ausführen über eine Seitentaste die normale Auswahl



- 1 Seitentaste drücken „Telefonbuch“ wählen
- 2 Seitentaste drücken Register auswählen
Warten auf Ansage : *»Namen auswählen«*
- 3 Seitentaste drücken Namen auswählen
- 4 Ruftaste drücken *»Hubert wird angerufen«*

Methode 2 Standardwahl für Jedermann

KURZANLEITUNG

DA1432XL

DOSCH&AMAND ™

der private Notrufsender Blindentelefon Sturzmelder



DA1432XL hat alle Funktionen, die für ein **sicheres Leben** und für den Erhalt der **sozialen Kontakte** notwendig sind.

DA1432XL ein DECT-Schnurlostelefon für Ihre Telefonanlage. Sie sind immer und überall sofort erreichbar, im Haus und im Garten. Im Notfall können Sie einen **Hilferuf** mit Auto-Anwahl an mehrere Personen auslösen.

Der Notrufsender

Die Ruftaste **2 Sekunden lang** drücken
»Hilferuf wird ausgelöst«

DA1432XL ruft Ihre persönlichen Hilfskontakte ab.



Wenn **DA1432XL** einen Sturz erkannt hat, wird der Hilferuf automatisch ausgeführt.

Der eingebaute **Sprachassistent** ist eine besonders wertvolle Eigenschaft des Notrufsenders. Er gibt wichtige Hinweise, liest die Namen aus der Telefonliste vor, informiert den angerufenen Notrufkontakt über Situation, Person und Standort

»dies ist ein Sturzalarm bei Maria Mustermann«

RÜCKLIEFERSCHEIN

Lieferadresse

Pressfinish electronic GmbH

Industriestr. 17
D-82110 GERMERING
DEUTSCHLAND

Absender

Vorname, Name

Straße, Nr

PLZ Stadt

Bestellnummer

Bestelldatum (Tag Monat Jahr)

Telefonanruf ausführen nur über Ruftaste die einfache Auswahl

Methode 3 Vorlesen bei starker Behinderung



- 1 Seitentaste drücken „Telefonbuch“ wählen
 - 2 Ruftaste drücken Namen werden vorgelesen
 - 3 Ruftaste drücken *»Hubert wird angerufen«*
- Abbruch Vorlesen durch langes Drücken der Ruftaste